



サリドマイドの方の採血のコツ

- ・「ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット」を用いる
- ・入室前に部屋を暖めておく
- ・これまで、採血に成功した血管と失敗した血管を本人に聞く
- ・採血する部位を温めながら、採血する四肢を下垂しておく
- ・駆血帯は緩めに巻く
- ・血管が見つけない場合は少し拳上してみる
- ・安全型翼状針「セーフタッチPSV」を刺す
- ・翼状針の両翼は必ずしも皮膚に密着させない
- ・凝固系以外の真空採血管から採血しないようにする

☆どうしても血管が見当たらない場合は鼠径部から採血する

「ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット」を用いた 採血の実際

- ・左ひざの内側にしか血管がなかった方

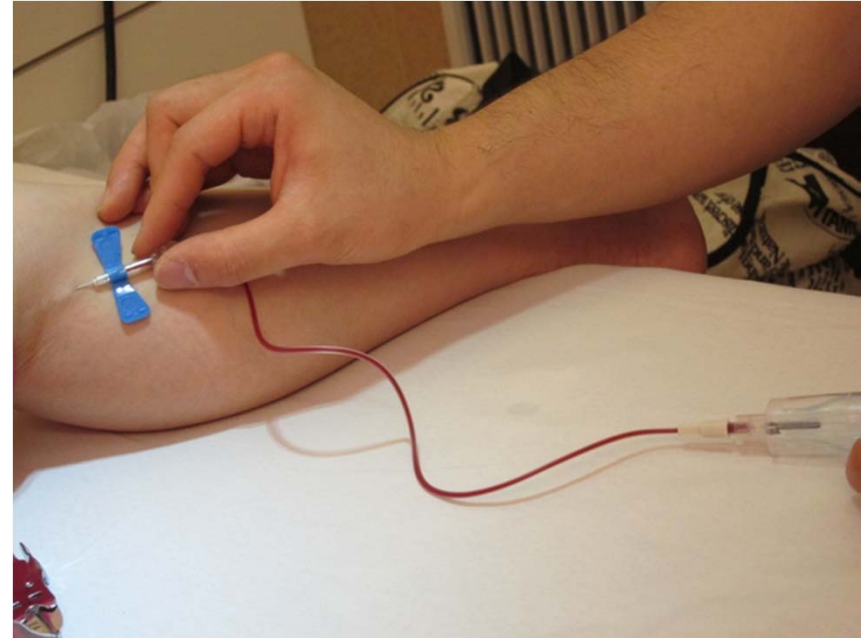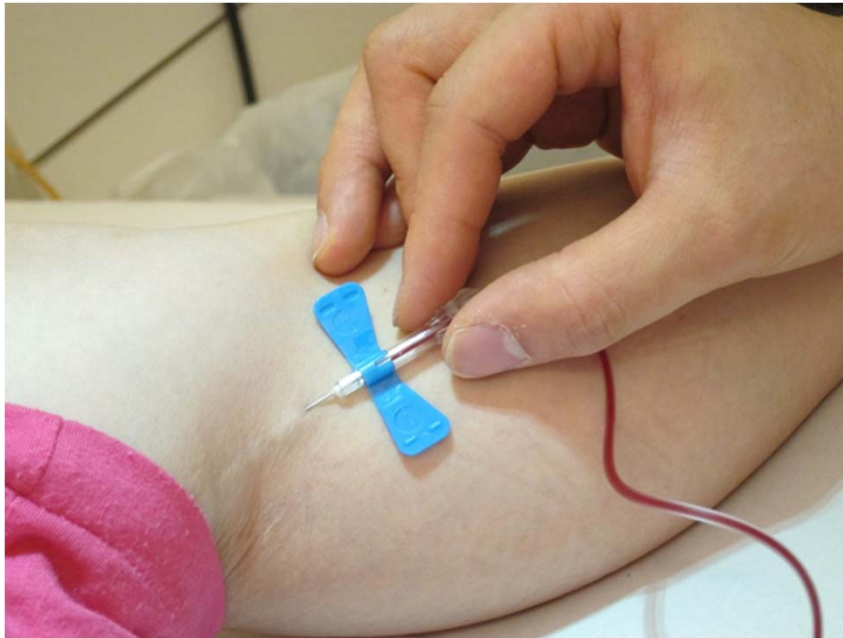


標準予防策(スタンダードプレコーション)として通常は手袋を装着しますが
器具の持ち方や指先の向きをお見せするため、手袋を装着せず撮影しています

- ・前腕の内側に血管があった方
- ・上肢が低形成で、細いので駆血帯は緩めに圧迫します



- ・前腕に内側に血管があった方
- ・安全型翼状針「セーフタッチPSV」の両翼を皮膚に密着させると針先に血管の内壁があたるので、自然な形で真空採血管へ接続

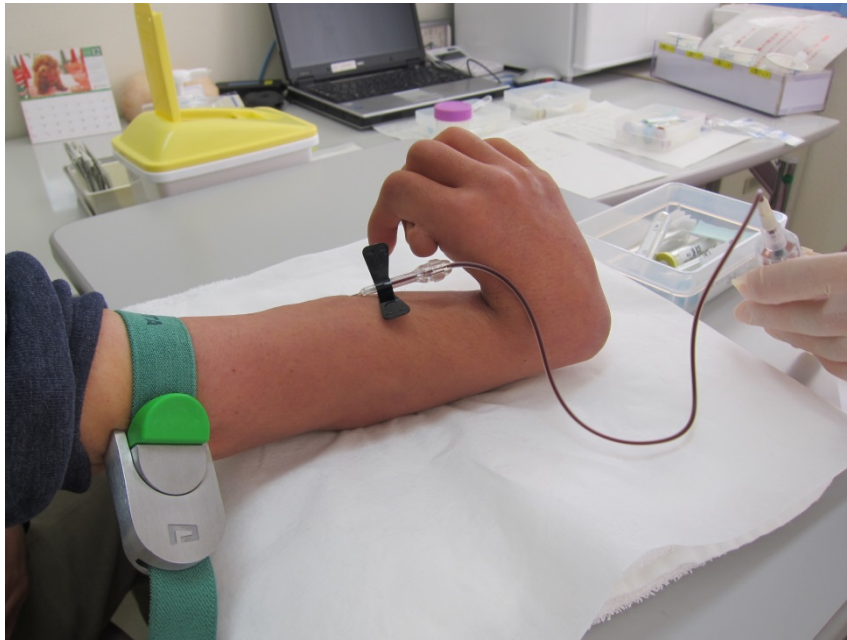

- ・前腕に内側に血管があった方
- ・安全型翼状針「セーフタッチPSV」を用いたので、
変形した手指に採血管が当たることなく採血できました



- ・手背に内側に最適な血管があった方
- ・採血する部位の皮膚が進展するようにタオルを工夫



- ・安全型翼状針「セーフタッチPSV」を皮膚に密着させると
針先に血管の内壁があたるので、自然な形で真空採血管へ接続

